

technoclone



# CEVERON<sup>®</sup> MFU 500

Mikropartikel Filtrationseinheit

*A clear view into the future!*

# Ceveron® MFU 500


Ceveron® MFU 500 ermöglicht eine einfache, schnelle und standardisierte Entfernung der **MIKROPARTIKEL** aus plättchenarmen Plasma.



## SCHNELL & EINFACH



PPP Proben in die obere Mikrotiterplatte pipettieren

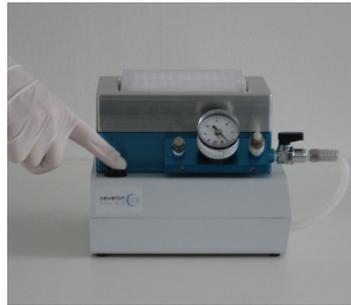

“START” Knopf drücken und die Filtration beginnt



“ENTLÜFTUNGSKNOPF” nach Beendigung der Filtration drücken



Das mikropartikelfreie Plasma wird in der Auffangplatte gesammelt

## KLEIN & KOMPAKT




Durch Filtration können thrombogene Mikropartikel genauso effektiv aus PPP entfernt werden wie durch Ultrazentrifugation.

### Abmessungen MFU 500:

Länge: 26,00 cm  
Breite: 20,00 cm  
Höhe: 16,05 cm

## STANDARTISIERT

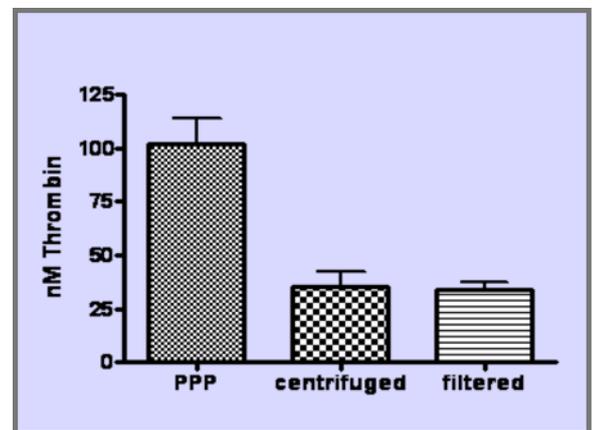

Produkt	Beschreibung	REF	Inhalt
Ceveron® MFU 500	Mikropartikel Filtrationseinheit	9821010	1 Instrument

CEV002D.003 06/2019

**Technoclone Herstellung von Diagnostika und Arzneimitteln GmbH**  
Brunner Str. 67 | 1230 Wien | Österreich  
Tel: +43 1 86373-0 | Fax: +43 1 86373-44  
products@technoclone.com | www.technoclone.com

